


### „WatchPAT™ ONE” komplekto turinys

1. Naudojimo vadovas
2. Prietaisas „WatchPAT™ ONE“ su piršto davikliu (1) ir krūtinės davikliu (2)\*
3. AAA maitinimo elementas (3)

\* „WatchPAT™ ONE E” komplekte krūtinės daviklio nėra

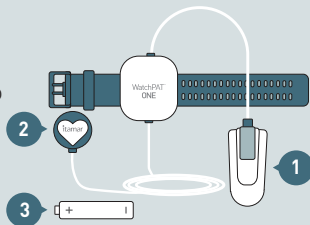

### Prieš naudodami „WatchPAT ONE“, atidžiai perskaitykite naudojimo nurodymus

Į savo mobilųjį prietaisą atsisiųskite „WatchPAT ONE“ programėlę (iš „Apple App Store“ ar „Google Play Store“).

**Pastaba.** Norėdami aktyvuoti prietaisą, turėkite 4 skaitmenų PIN.

- Nusirenkite aptempiančius drabužius, nusiimkite žiedus, laikrodį ir kitus papuošalus.
- Nuo tiriamo piršto nuvalykite nagų laką ir pašalinkite dirbtinį nagą. Piršto nagas turi būti apkirptas trumpai.
- Prietaisą reikia nešioti ant nepagrindinės rankos, o piršto daviklį galima tvirtinti prie bet kurio piršto, išskyrus nykštį.

**Pastaba.** Vaikai naudoti prietaisą turi prižiūrėti suaugusio asmens.

### Prietaiso naudojimas

#### Pasiruoškite tyrimui

- Patalpoje išjunkite visus radijo bangas skleidžiančius prietaisus – išmaniuosius laikrodžius, kitus išmaniuosius telefonus, ausines ir pan., nes jie gali paveikti tyrimo rezultatus.
- Savo telefone paleiskite „WatchPAT ONE“ programėlę.
- Vykdykite programėlėje rodomus tyrimo atlikimo nurodymus.

**Pastaba.** Ruošiant „WatchPAT ONE“ prietaisą tyrimui, jūsų telefone turi būti įjungtas interneto ryšys.

#### Baigus tyrimą

1. „WatchPAT ONE“ programėlėje paspauskite **END RECORDING** (baigti įrašą) ir vykdykite tolesnius nurodymus.
2. Jei programėlė išjungta, paleiskite ją, telefone įjunkite interneto ryšį ir laukite pranešimo **Thank You** (ačiū).

**Pastaba.** Tyrimas bus baigtas ir nusiųstas jūsų gydytojui tik kai programėlės ekrane pamatysite pranešimą **Thank You** (ačiū).

## Techninės informacijos žymėjimas



Skirta vienkartiniam naudojimui, pakartotinai nenaudoti



Temperatūros ribos 0–40 °C



Žr. naudojimo vadovą

1.5V DC

Maitinimo elemento darbinė įtampa

IP22

Apsauga nuo patekimo



Tik BF tipo darbinė dalis

FCC ID  
ZAPUBWPONE

Federalinės ryšių komisijos identifikacinis numeris



Medicinos prietaiso gamintojas

REF

Katalogo numeris

SN

Serijos numeris



Pagaminimo data



Galiojimo data



Produktas pažymėtas CE ženklu 2797 BSI

EC REP

Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



Pagal direktyvą 2012/19/ES dėl EEJA, visos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai, gaudžiamos jas išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šį produktą ir visas jo dalis šalinkite atsakingai ir nekenkdami aplinkai.



Dūžta, elgtis atsargiai



Laikyti sausiai

Step by step video:



### Svarbios pastabos

- Laikymo ir naudojimo temperatūra: nuo 0 iki 40 °C
- Nebandykite prijungti ar atjungti kokios nors prietaiso dalies
- Nekiškite į prietaisą jokių pašalinių daiktų.
- Jokiomis aplinkybėmis nemėginkite išspręsti problemos savarankiškai.



**Itamar Medical Ltd.**

9 Halamish Street, PO box 3579  
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel  
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598  
Help Desk: +1-888-748-2627

EC REP

**Arazy Group GmbH**

The Squaire 12, Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main  
Germany

**itamar**  
medical

www.itamar-medical.com