


# WatchPAT™ ONE

## РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СТЪПКА ПО СТЪПКА

### Кутията на WatchPAT™ ONE включва:

1. Ръководство за работа стъпка по стъпка
2. Устройство WatchPAT™ ONE – с накрайник за пръст на ръката (1) и сензор за гръден кош (2)\*
3. Батерия AAA (3)

\* Сензорът за гръден кош не е включен в комплекта на WatchPAT™ ONE E

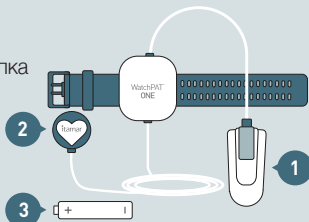

### Моля, прочетете следните инструкции, преди да използвате WatchPAT ONE:

Изтеглете приложението WatchPAT ONE на мобилното си устройство (налично в Apple App Store или Google Play Store).

**Забележка:** Подгответе своя четирицифрен PIN код за активиране на устройството.

- Сваляте всички плътно прилепнали дрехи, халки, часовници и други бижута.
- Отстранете всякакъв лак или изкуствени нокти от пръста на ръката, който ще бъде използван за изследването, и се уверете, че нокътят му е късо изрязан.
- Устройството трябва да се носи на недоминиращата ръка, а сензорът за пръст на ръката може да бъде закрепен на всеки пръст, с изключение на палеца.

**Забележка:** Може да е необходимо наблюдение от възрастен при използване на устройството.

### Работа с устройството:

#### Подготовка за стартиране на изследването:

- Моля, изключете всички предаватели в стаята, като смарт часовници, други смарт телефони и слушалки, тъй като те могат да повлияят на изследването.
- Отворете приложението WatchPAT ONE на мобилното си устройство.
- Следвайте инструкциите в приложението, които ще Ви покажат различните стъпки при провеждане на изследването.

**Забележка:** Вашият телефон трябва да има достъп до интернет по време на настройването на устройството WatchPAT ONE за изследването.

#### В края на изследването:

1. Натиснете бутон **END RECORDING** (КРАЙ НА ЗАПИСА) в приложението WatchPAT ONE и следвайте инструкциите.
2. Ако приложението е затворено, отворете го, уверете се, че телефонът Ви е свързан към интернет и изчакайте появата на съобщението „Thank You“ (Благодаря).

**Забележка:** Едва след като видите съобщението „Thank You“ (Благодаря) в приложението, изследването е приключило и е изпратено на Вашия лекар.

## Етикет с техническа информация



За еднократна употреба, да не се използва повторно



Температурни граници 0°C – 40°C



Вижте инструкциите за употреба

1.5V DC

Работно напрежение на батерията

IP22

Защита срещу проникване



Само приложена част тип BF

FCC ID  
ZAPUBWPN0E

Идентификационен номер на Федералната комисия по далекосъобщенията



Производител на медицинското изделие

REF

Каталожен номер

SN

Сериен номер



Дата на производство



Срок на годност



Продуктът е маркиран с логото CE 2797 за BSI

EC REP

Оторизиран представител в Европейската общност



Съгласно Директивата относно OEE0 2012/19/EC, всички отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEE0) трябва да се събират разделно и да не се третират заедно с обикновени битови отпадъци. Моля, третирайте отпадъците от този продукт и частите му по отговорен начин, щадящ околната среда.



Чупливо, да се внимава при използване



Продуктът трябва да се поддържа сух

Step by step video:



### Важни забележки:

- Температура на съхранение и работа: 0°C – 40°C
- Не се опитвайте да свързвате или разглобявате части от устройството.
- Не се опитвайте да поставяте чужди предмети в устройството.
- При никакви обстоятелства не се опитвайте сами да отстранявате проблеми в устройството.

REF: 0M2192484 - Ed.1



**Itamar Medical Ltd.**

9 Halamish Street, PO box 3579  
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel  
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598  
Help Desk: +1-888-748-2627

EC REP

**Arazy Group GmbH**

The Square 12, Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main  
Germany

**itamar**  
medical  
www.itamar-medical.com