


WatchPAT™ ONE

SAMM-SAMMULT JUHEND

WatchPAT™ ONE kast sisaldab:

1. Samm-sammult juhend
2. WatchPAT™ ONE seade -
sõrmesondi (1) ja rindkereanduriga (2)*
3. AAA-aku (3)

* WatchPAT™ ONE E ei sisalda rindkere andurit

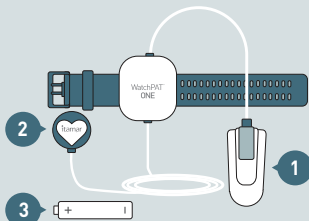

Enne WatchPAT ONE rakendamist lugege läbi järgmised juhised:

Laadige oma mobiilseadmesse alla rakendus WatchPAT ONE (saadaval Apple App Store'is või Google Play poes).

Märkus: Seadme aktiveerimiseks veenduge, et teil oleks neljakohaline PIN-kood.

- Eemaldage lahtised riided, sõrmused, käekellad ja muud ehted.
- Eemaldage sõrmelt küünelakk ja kunstküüned ning veenduge, et sõrmeküüs on lühikeseks lõigatud.
- Seadet tuleb kanda mitte domineerival käel ja sõrmeanduri saab kinnitada ükskõik millise sõrme külge, välja arvatud põial.

Märkus: Seadme rakendamiseks võib olla vajalik täiskasvanute järelevalve.

Seadme kasutamine:

Ettevalmistamine testi alustamiseks:

- Lülitage kõik muud ruumis olevad raadiosaateseadmed, näiteks nutikellad, muud nutitelefoniid ja kõrvaklapid välja, kuna see võib testi häirida.
- Avage oma mobiilseadmes rakendus WatchPAT ONE.
- Järgige rakenduse juhiseid, mis juhendavad teid testi toimimise etappides

Märkus: Teie telefonil peab olema Interneti-juurdepääs, kui seadistate testi jaoks WatchPAT ONE seadme.

Testi lõpus:

1. Vajutage rakenduses WatchPAT ONE nuppu **END RECORDING** ja järgige juhiseid.
2. Kui rakendus on suletud, avage see, veenduge, et telefon on Interneti-ühendusega, ja oodake "Thank you" teatist.

Märkus: Ainult siis, kui näete rakenduses esitatud teadet "Thank you", test täidetakse ja saadetakse arstile.

Tehnilise teabe märgistamine



Ühekordeks kasutamiseks, mitte uuesti kasutada



Piirtemperatuur 0°C - 40°C



Vaadake kasutusjuhendit

1.5V DC

Aku tööpinge

IP22

Varjutumiskaitse



Tüüp BF hõlmab ainult osa

FCC ID
ZAPUBWPONE

Föderaalse kommunikatsioonikomisjoni identifitseerimisnumber



Meditsiiniseadmete tootja

REF

Katalooginumber

SN

Seerianumber



Valmistamiskuupäev



Kõlblik kuni kuupäev



Toode on BSI jaoks tähistatud CE-logoga 2797

EC REP

Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses



Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile 2012/19/EL tuleb kõik elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed koguda eraldi ja neid ei tohi käidelda koos tavaliste olmeprüügiga. Kõrvaldage see toode ja kõik selle osad vastutustundlikult ning keskkonnasõbralikult.



Habras, käsitsege ettevaatlikult



Hoidke kuivana

Step by step video:



Olulised märkused:

- Ladustamis- ja töötemperatuur 0°C - 40°C
- Ärge proovige ühtegi seadme osa ühendada ega lahti ühendada.
- Ärge proovige seadmesse sisse viia ühtegi võrkeha.
- Ärge mingil juhul proovige probleemi ise lahendada.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598
Help Desk: +1-888-748-2627

EC REP

Arazy Group GmbH

The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

itamar
medical
www.itamar-medical.com

REF: 0M2192488 - Ed.1