

+ Vaihe 4 – Laitteen kytkeä

+ Vaihe 5 – Yön aikana

Huomautus: aite kytkeä päälle vasta sitten, kun olet valmiina nukkumaan.



- Aina kun painat painiketta, .
- Jos sinun on noustava ylös yön aikana, älä irrota laitetta tai antureita.
- Älä paina painikkeita, jos sinun on noustava ylös yön aikana.
- Jos käyt WC:ssä, varo kastelemasta WatchPAT™ 300 -laitetta.
- WatchPAT™ 300-laitteen käytön ei tule aiheuttaa kipua tai epämukavuutta. Jos liiallista epämukavuutta esiintyy, poista laite käytöstä ja soita käyttäjätukeen.

+ Vaihe 6 – Seuraava aamu

eräämisen jälkeen:

- 6a.** Laite sammuu automaattisesti. Sammutuspainiketta ei ole.
- 6b.** Irrota sormianturi ja RESBP-anturi.
- 6c.** Ota laite pois ranteesta.
- 6d.** Laita kaikki osat takaisin säilytysrasiaan.



Tärkeitä huomioita:

- Älä yritä liittää tai kytkeä irti mitään yksikön osaa.
- Älä työnnä yksikköön mitään vieraita esineitä.
- Älä yritä liittää WatchPAT™ 300 -laitetta sähköpistorasiaan tai muuhun laitteeseen, koneeseen tai tietokoneeseen.
- Älä yritä korjata mitään vikoja itse missään olosuhteissa.
- Sormianturi on kertakäyttöinen. Jos . Huomaa, että käytetyn anturin käyttäminen voi aiheuttaa ristikonaminaation.
- Ota tarvittaessa tai vakavassa tapauksessa yhteys palvelutoimistoomme ilmoittaaksesi asiasta ja saadaksesi lisäohjeita. Ilmoita vakavasta tapauksesta myös asianmukaiselle viranomaiselle.

4a. Paina tukevasti virtapainiketta, kunnes näyttö valaistuu. Seuraava näyttöruutu "Please wait Testing..." (Odota, testataan) Muutaman sekunnin kuluttua ilmestyy viesti "GOOD NIGHT!!!" ✓ (Hyvää yötä). Näyttö sammuu hetken kuluttua.

4b. Jos ongelmatapauksessa esiin tulee "TEST ABORTED" ✗ (testi keskeytetty), soita käyttäjätukeen 1-888-748-2627

Olet nyt valmis menemään nukkumaan.

4c. Mikäli sormi ei ole anturin sisällä, esiin tulee virheviesti ohjeistaen sinua laittamaan sormi sisään. Odota, kunnes laite sammuu, työnnä sormi sisään ja yritä uudelleen.

Kysymyksiä?
Soita käyttäjätuen numeroon
1-888-748-2627

REF:OM2193395 Rev 5 2023-02



Vaiheittaiset ohjeet

WatchPAT™ 300

Kotona suoritettava unitutkimus



Katso ohjevideo sivustolta:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

itamar
medical

| Terveyttä yksinkertaisesti

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Muu maailma:

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Puh.: + 972 4 617 7000
Faksi + 972 4 627 5598

Yhdysvallat:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Puh.: 1 888 748 2627

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Saksa

Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajaa tämän laitteen myynnin laillistetulle lääkärille tai hänen määräyksensä.

Tekijänoikeudet © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT ja PAT ovat ZOLL Medical Corporationin tytäryhtiön Itamar Medical Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

WatchPAT™ 300 – Vaiheittaiset ohjeet

Näitä ohjeita tulee käyttää sen jälkeen, kun lääkäri on näyttänyt sinulle miten WatchPAT™ 300 -laitetta käytetään.



- A – Virtapainike
B – Hengitystievaivojen kuorsaus- ja kehon asentoanturi (RESBP)
C – Sormianturi

Ennen WatchPAT™ 300 -laitteen käyttöä:

- WatchPAT™ 300 -laite on suositeltavaa kiinnittää ei-hallitsevaan käteen.
- Anturin voi kiinnittää mihin tahansa sormeen peukaloa lukuun ottamatta. Jos sinulla on paksut sormet, suositellaan pikkusormea.
- Riisu ennen käyttöä tiukat vaatteet, kellot, sormukset ja muut korut.
- Poista testisormesta kynsilakka ja tekokynnet ja varmista, että kynsi on leikattu lyhyeksi.

Huomautuksia:

- Kun olet kytkenyt WatchPAT™ 300 -laitteen päälle, sitä ei voi sammuttaa.
- Käytä laitetta ja kytke se päälle vasta sitten, kun olet valmis nukkumaan.
- Laitteen pukeminen voi edellyttää aikuisen valvontaa.
- Oppaan kuvat näyttävät vasemman käden, mutta samaa menettelyä voidaan käyttää oikeaan käteen.




Säilytysrasian sisältö:

- Tämä opas
- Laite ja sormianturi
- Hengitystievaivojen kuorsaus- ja kehon asentoanturi (RESBP)

Käyttäjätuen numero
1-888-748-2627




+ Vaihe 1 – Hengitystievaivojen kuorsaus- ja kehon asentoanturin (RESBP) käyttö

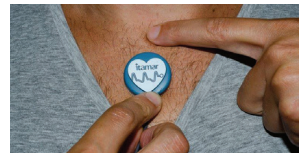

1a. Miehet: aja tarvittaessa runsasta rintakarvoitusta pois.


1b. Vie RESBP-anturi yöpaidan hihan läpi kaula-aukkoon saakka.

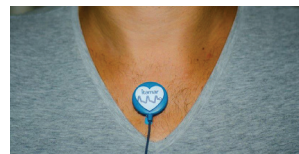

1d. Laita anturi keskelle rintalastan yläosaa kaulan alapuolelle. Varmista, että RESBP-anturin kuva on ylöspäin.



1c. Poista anturin taustapuolella oleva valkoinen paperi.

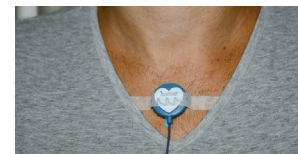

1e. Kiinnitä RESBP-anturi myös lääkinällisellä teipillä.

+ Vaihe 2 – WatchPAT™ 300 -laitteen käyttö



- 2a.** Kiinnitä laite ei-hallitsevaan käteen.
2b. Kiinnitä ranneke (ei liian tiukalle).

+ Vaihe 3 – Sormianturin käyttö



- 3a.** Anturin voi kiinnittää mihin tahansa sormeen peukaloa lukuun ottamatta. Jos sinulla on paksut sormet, suositellaan pikkusormea.
3b. Työnnä sormi anturiin sen päätyyn saakka. Tarran, jossa lukee TOP, tulee olla sormen päällä (kynnen yläpuolell).



- 3c.** Paina anturin kärkeä kovaa pintaa vasten (esim. pöytää, säärtä).
3d. Vedä TOP-kieleke kokonaan irti anturista.