

WatchPAT™ ONE

Prueba desechable de apnea del sueño para uso en casa

Programa Verde de WatchPAT™ ONE

Si quiere participar del Programa Verde de WatchPAT™ ONE*, se indica a continuación lo que debe hacer al finalizar la prueba de sueño:

1. Retire la batería del dispositivo WatchPAT™ ONE y coloque el dispositivo en su caja.
2. Visite: www.itamar-medical.com/greenprogram llene el formulario e imprima la etiqueta de devolución prepagada.
3. Pegue la etiqueta en la caja y envíenos la caja de forma totalmente gratuita.

¡Gracias por ayudarnos a hacer un mundo más verde!
El Programa Verde de WatchPAT™ ONE* está disponible en ciertos países.

⚠️ Notas importantes:

- El WatchPAT™ ONE se indica para pacientes que se sospecha tienen trastornos de respiración relacionados con el sueño.
- El WatchPAT™ ONE es de un solo uso. La reutilización de productos de un solo uso puede provocar contaminación cruzada.
- En el caso de un incidente grave, póngase en contacto con el profesional de atención médica y la oficina de servicios de Itamar para recibir más instrucciones.
- Temperaturas de almacenamiento y funcionamiento 0 °C - 40 °C
- No se debe conectar ni desconectar ninguna parte de la unidad.
- No intente introducir ningún objeto extraño en el dispositivo.
- No intente arreglar el dispositivo WatchPAT™ ONE por su cuenta bajo ninguna circunstancia.
- El WatchPAT™ ONE no debe causar ninguna molestia o dolor. En caso de que tenga una molestia insoportable, retire el dispositivo WatchPAT™ ONE y llame al servicio de asistencia.
- Examine visualmente la batería antes de insertarla, a fin de asegurarse de que no esté hinchada, agrietada, con fuga o que no presente ningún otro defecto.
- Antes de utilizar el WatchPAT™ ONE, el paciente debe ser capacitado por el personal clínico.



Para ver el video de instrucciones paso a paso, visite la página watchpatone-howtouse.com



Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de asistencia médica de ZOLL Itamar™ al:
1-888-748-2627

ZOLL itamar

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Teléfono: +972-4-6177000
Fax: +972-4-6275598

EC REP **Arazy Group GmbH**
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Alemania

MD

lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

CE

2797

WatchPAT™ ONE

Prueba desechable de apnea del sueño para uso en casa



Guía de instrucciones paso a paso

Escanee el código QR, que se muestra debajo, para descargar la aplicación WatchPAT™ ONE



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

ZOLL itamar

WatchPAT™ONE | Guía de instrucciones paso a paso | Prueba desechable de apnea del sueño para uso en casa.

Esta guía le conducirá paso a paso y le mostrará cómo utilizar correctamente la prueba de apnea del sueño para uso en casa WatchPAT™ONE.

Antes de aplicar WatchPAT™ONE:

- + Asegúrese de que tenga acceso a internet, su teléfono, el dispositivo WatchPAT™ONE y el código PIN.
- + Retírese la ropa ajustada, alhajas y accesorios.
- + Seleccione un dedo de su mano no dominante, salvo el pulgar (si tiene dedos largos, utilice el meñique).
- + Recórtese la uña del dedo, y retire cualquier esmalte o uña postiza del dedo seleccionado.

Nota: Utilice solo baterías AAA alcalinas.

No inserte la batería hasta que esté listo para acostarse.


1. Descargue la aplicación WatchPAT™ONE a su teléfono (disponible en App Store y Google Play Store).

2. Abra la aplicación WatchPAT™ONE y otorgue todos los permisos solicitados. Estos permisos son necesarios para que la aplicación pueda funcionar. Retire el WatchPAT™ONE de la caja. Puede hacer clic en el vínculo de la guía rápida para ver un recorrido de la aplicación que muestra cómo configurar el dispositivo WatchPAT™ONE.

Presione el botón "Comenzar la configuración" cuando esté listo.

Comenzar la configuración

3. Inserte la batería en el dispositivo WatchPAT™ONE. Pulse > cuando haya finalizado.

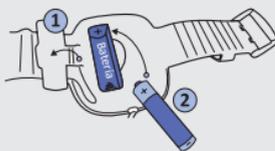

4. Preparación:

- Asegúrese de que su teléfono permanezca enchufado toda la noche y que no esté en modo avión.
- Apague todos los dispositivos electrónicos innecesarios en el cuarto.
- Asegúrese de que su teléfono esté ubicado a no más de 5 metros (15 pies) del dispositivo WatchPAT™ONE.
- Se requiere al menos 6 horas para el registro de datos.

5. Ingrese el código PIN de 4 dígitos que le proporciona el consultorio de su médico o el proveedor, y presione >.



6. Ponga el dispositivo WatchPAT™ONE en su mano no dominante. Asegúrese de que no esté demasiado apretado ni demasiado flojo. Pulse > cuando haya finalizado.




7. Si su dispositivo WatchPAT™ONE incluye un sensor de pecho:
 - Si fuera necesario, recorte el pelo del pecho para asegurarse de que el sensor se adhiera directamente a su piel.
 - Deslice el sensor de pecho a través de su manga y hasta la abertura del cuello.
 - Despegue el papel blanco de la parte posterior del sensor.
 - Fije el sensor en el centro del hueso de la parte superior del pecho, debajo de la escotadura esternal.
 - Se recomienda fijar el sensor en su lugar con esparadrapo. Pulse > cuando haya finalizado.



8. Inserte el dedo de prueba hasta el final dentro de la sonda. Asegúrese de que la etiqueta marcada TOP esté visible cuando mire hacia el dorso de su mano.

Empuje la punta de la sonda contra una superficie dura (como por ej, una mesa) y lentamente tire hacia atrás la pestaña marcada TOP para retirarla de la sonda.

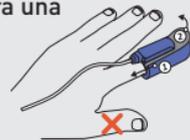

9. Haga clic en el botón "INICIAR GRABACIÓN" para comenzar el estudio del sueño. Asegúrese de dejar su teléfono conectado al cargador.

Comenzar el registro

10. En la mañana, presione el botón "DETENER GRABACIÓN" y espere que el dispositivo WatchPAT™ONE finalice la transmisión de datos. Al finalizar la transmisión de datos, recibirá un mensaje de felicitación.

Detención de la grabación

Cierre la aplicación

Una vez que lo reciba, presione "Cerrar aplicación".

11. Retire el sensor de pecho, la sonda y el dispositivo WatchPAT™ONE. Deseche el dispositivo WatchPAT™ONE de acuerdo con las disposiciones locales.