

WatchPAT™ ONE

Uniapneatesti kotikäyttöön, kertakäyttöinen

WatchPAT™ ONE Green Program

Ottaaksesi osaa WatchPAT™ ONE Green Program*-ohjelmaan, tässä on kaikki, mitä sinun pitää tehdä unitutkimuksen jälkeen:

1. Irrota paristo WatchPAT™ ONE-laitteesta ja laita laite takaisin laatikkoonsa.
2. Käy sivustolla: www.itamar-medical.com/greenprogram täytä lomake ja tulosta valmiiksi maksettu palautuslipuke.
3. Kiinnitä lipuke laatikkoon ja lähetä se takaisin meille – täysin veloitusetta.

Kiitos siitä, että autat tekemään vihreämpää maailmaa!

*WatchPAT™ ONE Green Program on saatavilla tietyissä maissa.

⚠ Tärkeitä huomioita:

- WatchPAT™ ONE on tarkoitettu sellaisten potilaiden käyttöön, joilla epäillään olevan unenaikaisia hengityshäiriöitä.
- WatchPAT™ ONE on kertakäyttöinen. Kertakäyttöisten tuotteiden uudelleenkäyttö saattaa aiheuttaa ristikontaminaation.
- Ota vakavassa tapauksessa yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja Itamarin asiakaspalveluun saadaksesi lisäohjeita.
- Säilytys- ja käyttölämpötila 0–40 °C
- Älä yritä liittää tai kytkeä irti mitään yksikön osaa.
- Älä työnnä laitteeseen mitään vieraita esineitä.
- Älä missään olosuhteissa yritä korjata WatchPAT™ ONE -laitetta itse.
- WatchPAT™ ONE -laitteen ei tule aiheuttaa kipua tai epämukavuutta. Jos tunnet sietämätöntä epämukavuutta, poista WatchPAT™ ONE -laite ja soita käyttäjätukeen.
- Tarkista paristo silmämääräisesti ennen asentamista ja varmista, ettei se ole turvonnut, murtunut, vuotava tai ettei siinä ole muuta vikaa.
- Kliinisen henkilöstön on annettava potilaalle opastusta WatchPAT™ ONE-laitteen käytöstä ennen kuin potilas aloittaa laitteen käytön.



Vaiheittainen video-ohje on katsottavissa osoitteessa watchpatone-howtouse.com



Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys
ZOLL Itamarin™ lääkinnällisen
käyttäjätuen numeroon:
1-888-748-2627

ZOLL itamar

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Puh: +972-4- 6177000,
Faksi: +972-4-6275598

Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Saksa



CE

MD

lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

2797

WatchPAT™ ONE

Uniapneatesti kotikäyttöön, kertakäyttöinen



Vaiheittainen ohje

Lataa WatchPAT™ ONE
-sovellus skannaamalla
alla oleva QR-koodi



ZOLL itamar

WatchPAT™ONE | Vaiheittainen käyttöopas | Uniapneatesti kotikäyttöön, kertakäyttöinen

Tässä ohjeessa kerrotaan vaiheittain, miten kotikäyttöistä WatchPAT™ONE -uniapneatestiä käytetään oikein.

Ennen WatchPAT™ONE -laitteen käyttöä:


- ✦ Varmista, että sinulla on Internet-yhteys, puhelin, WatchPAT™ONE -laite ja PIN-koodi.
 - ✦ Riisu tiukat vaatteet, korut ja muut varusteet.
 - ✦ Valitse jokin sormi ei-hallitsevasta kädestä peukaloa lukuun ottamatta (jos sinulla on paksut sormet, käytä pikkusormea).
 - ✦ Leikkaa valitun sormen kynsi lyhyeksi ja poista mahdollinen kynsilakka tai tekokynsi.
- Huomautus: Käytä ainoastaan AAA-alkaliparistoa. Aseta paristo paikalleen vasta, kun olet valmis yöunille.

1. Lataa WatchPAT™ONE -sovellus puhelimeesi (saatavissa App Storesta ja Google Play Storesta).

2. Avaa WatchPAT™ONE -sovellus ja myönnä kaikki pyydetty käyttöoikeudet. Sovellus ei toimi oikein ilman näitä käyttöoikeuksia. Poista WatchPAT™ONE pakkauksestaan. Klikkaamalla pikaoppaan linkkiä saat sovellusesittelyn WatchPAT™ONE -laitteen asentamisesta. Paina "Aloita asennus", kun olet valmis.

Aloita asennus

3. Aseta paristo WatchPAT™ONE -laitteeseen. Kun olet valmis, valitse >.

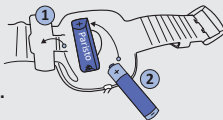

4. Valmistelu:

- Varmista, että puhelin on latauksessa yli yön ja ettei se ole lentotilassa.
- Sammuta kaikki huoneessa olevat tarpeettomat elektroniset laitteet.
- Varmista, että puhelimesi on enintään 5 metrin päässä WatchPAT™ONE -laitteesta.
- Tarvitaan vähintään 6 tunnin mittainen tietojen tallennus.

5. Syötä lääkäritäsi tai muulta taholta saamasi nelinumeroinen PIN-koodi ja valitse >.



6. Laita WatchPAT™ONE -laite ei-hallitsevaan käteen. Varmista, ettei se ole liian kireällä eikä liian löysällä. Kun olet valmis, valitse >.



7. Jos WatchPAT™ONE -laitteen mukana on rinta-anturi:

- Aja tarvittaessa rintakarvoitusta pois, jotta anturi kiinnittyy suoraan ihoon.
- Vie rinta-anturi hihasta sisään aina kaulaukon kohdalle saakka.
- Poista anturin taustapuolella oleva valkoinen paperi.
- Kiinnitä anturi keskelle rintalastan yläosaa, aivan rintalastan kaulaloven alapuolelle.
- Anturin paikalleen kiinnittämiseen suositellaan lääkinällistä teippiä. Kun olet valmis, valitse >.



8. Työnnä testattava sormi sisään anturin pohjaan saakka. Varmista, että tarran TOP-merkki on näkyvässä, kun katsot kämmenselkää. Paina anturin kärkeä kovaa pintaa (esim. pöytää) vasten ja vedä TOP-kieleke hitaasti irti anturista.



9. Klikkaa "Aloita tallennus" -painiketta unitutkimuksen aloittamiseksi. Varmista, että jätät puhelimen kytkettynä laturiin.

Aloita tallennus

10. Paina aamulla "Pysäytä tallennus" -painiketta ja odota, että WatchPAT™ONE -laite saa tiedonsiirron loppuun. Tiedonsiirron päätyttyä saat onnitteluviestin.

Pysäytä tallennus

Sulje sovellus

Kun viesti on saapunut, paina "Sulje sovellus".

11. Riisu rinta-anturi, sormianturi ja WatchPAT™ONE -laite. Hävitä WatchPAT™ONE-laite paikallisten määräysten mukaisesti.