

WatchPAT™ ONE

Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu

Programul Verde WatchPAT™ ONE

Pentru a participa la Programul Verde WatchPAT™ ONE*, iată tot ce trebuie să faceți după finalizarea testului de somn:

1. Scoateți bateria din dispozitivul WatchPAT™ ONE și puneți dispozitivul la loc în cutia sa.
2. Vizitați: www.itamar-medical.com/greenprogram completați formularul și printați eticheta de retur preplătită.
3. Lipiți eticheta pe cutie și trimiteți cutia înapoi la noi — complet gratuit.

Vă mulțumim că ne ajutați să facem lumea mai verde!

*Programul Verde WatchPAT™ ONE este disponibil în anumite țări.

⚠️ Note importante:

- WatchPAT™ ONE este indicat pentru pacienți suspecți de tulburări respiratorii asociate somnului.
- Dispozitivul WatchPAT™ ONE este de unică folosință. Reutilizarea produselor de unică folosință poate cauza contaminare încrucișată.
- În cazul unui incident grav, contactați-vă medicul specialist și biroul de service al Itamar pentru a primi instrucțiuni suplimentare.
- Temperaturi de depozitare și funcționare 0°C - 40°C
- Nu încercați să conectați sau să deconectați nicio parte a aparatului.
- Nu încercați să introduceți obiecte străine în dispozitiv.
- În niciun caz nu încercați să reparați singur(ă) dispozitivul WatchPAT™ ONE.
- Dispozitivul WatchPAT™ ONE nu ar trebui să provoace disconfort sau durere. În cazul în care întâmpinați un disconfort insuportabil, scoateți dispozitivul WatchPAT™ ONE și contactați telefonic biroul de asistență.
- Inspectați vizual bateria înainte de a o introduce, pentru a vă asigura că nu este umflată sau crăpată, că nu curge sau prezintă alte defecte.
- Înainte de a utiliza WatchPAT™ ONE, pacientul trebuie instruit de personalul medical.



Pentru instrucțiuni video pas cu pas, accesați watchpatone-howtouse.com



Pentru orice întrebări, contactați Biroul de asistență ZOLL Itamar™ Medical la numărul de telefon:
1-888-748-2627

ZOLL Itamar™

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Tel.: +972-4-6177000,
Tel.: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germania



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

2797

WatchPAT™ ONE

Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu



Ghid de instrucțiuni pas cu pas

Scanați codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația WatchPAT™ ONE



ZOLL Itamar™

WatchPAT™ONE | Ghid de instrucțiuni pas cu pas | Test de unică folosință pentru apnee în somn, pentru utilizare la domiciliu

Acest ghid vă va îndruma pas cu pas, arătându-vă cum să utilizați corect testul pentru apnee în somn, pentru utilizare la domiciliu WatchPAT™ONE.

Înainte de a aplica WatchPAT™ONE:

- Asigurați-vă că aveți la dispoziție acces la Internet, telefonul dumneavoastră, dispozitivul WatchPAT™ONE și codul PIN.
- Scoateți-vă îmbrăcămintea strâmtă, bijuteriile și accesoriile.
- Selectați un deget de la mâna dvs. nedominantă, cu excepția degetului mare (dacă aveți degete mari, folosiți degetul mic).
- Tăiați unghia și îndepărtați, dacă este cazul, lacul de unghii sau unghia artificială de pe degetul selectat.

Notă: Utilizați numai o baterie alcalină AAA.

Nu introduceți bateria până când nu sunteți gata de culcare.


1. Descărcați aplicația WatchPAT™ONE pe telefonul dumneavoastră (disponibilă în magazinele de aplicații App Store și Google Play).

2. Deschideți aplicația WatchPAT™ONE și acordați toate permisiunile solicitate. Aceste permisiuni sunt necesare pentru funcționarea aplicației. Scoateți dispozitivul WatchPAT™ONE din cutie. Puteți accesa linkul pentru ghidul rapid pentru un tur al aplicației care vă arată cum să configurați dispozitivul WatchPAT™ONE. Când sunteți gata, apăsați butonul "Start configurare".

Start configurare

3. Introduceți bateria în dispozitivul WatchPAT™ONE.

Apăsați > când sunteți gata.

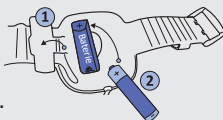

4. Pregătire:

- Asigurați-vă că telefonul rămâne conectat peste noapte și că nu este în modul avion.
- Opriți orice dispozitive electronice aflate în cameră și care nu sunt necesare.
- Asigurați-vă că telefonul se află la cel mult 15 ft/5 metri de dispozitivul WatchPAT™ONE.
- Este obligatoriu să existe cel puțin 6 ore de înregistrare a datelor.

5. Introduceți codul PIN din 4 cifre furnizat de cabinetul medicului dvs. sau de furnizorul dvs. și apăsați tasta >.



6. Puneți dispozitivul WatchPAT™ONE pe mâna dumneavoastră non-dominantă. Asigurați-vă că nu este nici prea strâns și nici prea lejer. Apăsați > când sunteți gata.



7. În cazul în care dispozitivul dumneavoastră WatchPAT™ONE include un senzor toracic:

- Dacă este necesar, tundeți-vă părul de pe piept pentru a vă asigura că senzorul este atașat direct de piele.
- Treceți senzorul toracic prin mânecă până la deschizătura de la gât.
- Îndepărtați hârtia albă din spatele senzorului.
- Atașați senzorul în centrul părții superioare a sternului, chiar sub incizura sternală.
- Se recomandă fixarea senzorului în poziție cu leucoplast. Apăsați > când sunteți gata.



8. Introduceți complet în sondă degetul testat. Asigurați-vă că autocolantul cu inscripția TOP este vizibil când vă uitați la dosul mâinii. Apăsați vârful sondei pe o suprafață fermă (de ex., o masă) și trageți încet de mica folie de protecție cu inscripția TOP înspre înapoi pentru a o scoate din sondă.



9. Apăsați butonul „Start înregistrare” pentru a începe studiul de somn. Asigurați-vă că lăsați telefonul conectat la încărcător.

Start înregistrare

10. De dimineață apăsați butonul „Stop înregistrare” și așteptați până când dispozitivul WatchPAT™ONE finalizează transmiterea datelor. După finalizarea transmiterii datelor, veți primi un mesaj de felicitare. După primirea mesajului, apăsați butonul „Închidere aplicație”.

Stop înregistrare

Închidere aplicație

11. Îndepărtați senzorul toracic, sonda și dispozitivul WatchPAT™ONE. Vă rugăm să eliminați dispozitivul WatchPAT™ONE în conformitate cu reglementările locale.