

WatchPAT[®] ONE

Slaapapneu thuisonderzoek voor eenmalig gebruik

Kijk voor een stap voor stap
video-instructie op

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Slaapapneu thuisonderzoek voor eenmalig gebruik

Etikettering met technische informatie

	Let op: Dit apparaat mag op grond van federale wetgeving uitsluitend worden verkocht door of namens een zorgprofessional
	Eenmalig gebruik, niet hergebruiken
	Temperatuurgrens 0°C - 40°C
	Zie de gebruiksaanwijzing
1.5V DC	Bedrijfsvoeding van de batterij
IP22	IP-code
	Toegepast onderdeel van het type BF
	Identificatienummer Federal Communications Commission
	Fabrikant van het medische apparaat
	Catalogusnummer
	Serienummer
	Productiedatum
	Uiterste gebruiksdatum
	Volgens de AEEA-richtlijn 2012/19/EU moet alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (EEA) gescheiden worden ingezameld en niet samen met regulier huishoudelijk afval worden verwerkt. Gooi dit product en alle onderdelen ervan op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier weg.
	Voorzichtig, breekbaar
	Vorkom contact met water
IC: 27705-WATCHPATONE Het ICSD Canada certificaatnummer	
HWN: WatchPAT ONE Identificeert de hardwarespecificaties van een productversie.	
	Medisch hulpmiddel
	Japane certificeringsymbolen

REF 14013422 - E.3

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met
Itamar[®] Medical helpdesk
via:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Stap voor stap gebruikshandleiding



Belangrijke opmerkingen:

- Opslag- en bedieningstemperaturen 0°C - 40°C
- Probeer geen enkel onderdeel van het apparaat aan te sluiten of los te koppelen.
- Probeer geen vreemde voorwerpen in het apparaat te introduceren.
- Probeer een probleem nooit zelf op te lossen.
- De WatchPAT[®] ONE hoort geen ongemak of pijn te veroorzaken. Verwijder het apparaat en bel de helpdesk als u ondraaglijk ongemak ervaart.
- De batterij voor het plaatsen visueel inspecteren op bol staan, barsten, lekkage of een ander defect.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, Postbus 3579
Caesarea 308900, Israël
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598



Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Duitsland



Scan de QR-code hieronder om de
WatchPAT[®] ONE app te downloaden



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Voor een stap voor stap video-instructie,
ga naar watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Slaapapneu thuisonderzoek voor eenmalig gebruik

Stap voor stap gebruikshandleiding


Deze handleiding laat u stap voor stap zien hoe u de WatchPAT® ONE Slaapapneu Thuis test correct gebruikt.

Voordat u de WatchPAT® ONE omdoet:

- ✦ Het is aan te raden om de WatchPAT® ONE aan uw niet-dominante hand te bevestigen.
- ✦ De sensor kan om elke vinger gedragen worden, behalve de duim.
- ✦ Verwijder voor gebruik strakke kleding, ringen, horloges en andere sieraden.
- ✦ Verwijder nagellak en kunstnagels van de testvinger en zorg ervoor dat de vingernagel kortgeknipt is.

Opmerking: Gebruik alleen AAA alkalinebatterijen. Plaats de batterij vlak voordat u naar bed gaat.

1. Zorg ervoor dat u internettoegang hebt en uw telefoon, WatchPAT® ONE en pincode klaar hebt liggen voordat u verder gaat met het slaaponderzoek.

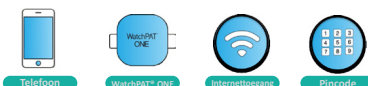

2. Download de app van WatchPAT® ONE op uw mobiele apparaat (beschikbaar via Apple App Store en Google Play Store).



3. Open de WatchPAT® ONE-app en accepteer alle vereiste toestemmingen. Deze toestemmingen zijn nodig om de app te laten functioneren.

Haal de WatchPAT® ONE uit de doos. Druk op de "Voorbeeld"-knop in de app voor een kort overzicht voor het instellen van het apparaat.


VOORBEELD

Druk op de "Klaar"-knop als u klaar bent.

KLAAR

4. Plaats de batterij in de WatchPAT® ONE.

Druk op "Volgende" als dat gedaan is.

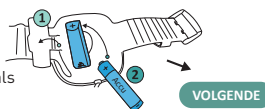

5. Verwijder uw horloge en sieraden van uw testhand.

Druk op "Volgende" als dat gedaan is.




6. Voer de viercijferige pincode in die u van uw huisarts of zorgverlener hebt ontvangen en druk op "Enter".

PINCODE INVOEREN
Voer uw toegewezen viercijferige pincode in (persoonlijk identificatienummer) en tik op ENTER

ENTER

7. Bevestig de WatchPAT® ONE aan uw niet-dominante hand. Zorg ervoor dat het niet te strak of te los zit.

Druk op "Volgende" als dat gedaan is.

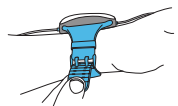

8. Neem de borstsensor (snurk- en lichaamspositiesensor) en voer de kabel via uw mouw naar de halsopening. Verwijder de folie van de sticker en plak de sensor net onder de sternale inkeping.

Druk op "Volgende" als dat gedaan is.


* Als uw WatchPAT® ONE geen borstsensor heeft, kunt u deze stap overslaan.



9. Schuif de probe helemaal om een vinger van uw niet-dominante hand. U kunt elke vinger hiervoor gebruiken, behalve de duim. De probe moet zo geplaatst worden dat de sticker met daarop TOP boven de vingernagel zit. Druk de probe tegen een hard oppervlak en trek voorzichtig de TOP-folie naar u toe om het van de probe te verwijderen.

Druk op "Volgende" als dat gedaan is.

VOLGENDE

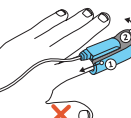

10. U bent nu klaar. De laatste stappen voordat u aan het slaaponderzoek begint:

- a. Zorg ervoor dat de afstand tussen uw telefoon en de WatchPAT® ONE niet meer dan 15 voet/5 meter is.
- b. Schakel alle andere zendapparaten in de kamer uit, zoals andere smartphones, smartwatches en koptelefoons, zodat ze het onderzoek niet kunnen storen.
- c. Verbind uw telefoon met de oplader, deze moet de hele nacht aangesloten blijven. Als u er's nachts uit moet, houd dan de telefoon aangesloten. Het is niet nodig om de telefoon mee te nemen.

Druk op "Start" om uw slaaponderzoek te beginnen.

START

11. Druk op "Einde opname" zodra u's ochtends wakker wordt en wacht enkele minuten zodat het apparaat de gegevensoverdracht kan voltooien. Na voltooiing van de gegevensoverdracht ontvangt u een bedankbericht.

Als het ontvangen is, drukt op "Sluit app".

EINDE OPNAME

SLUIT APP

12. Verwijder de borstsensor, probe en WatchPAT® ONE.

Buiten de VS: Het is niet nodig het apparaat te behouden of terug te sturen. U kunt het gewoon weggooien.

Voor de VS: Als u mee wilt doen aan het WatchPAT® ONE Green Program, kunt u het apparaat terugsturen met het meegeleverde franco retouretiket. Plaats het apparaat na afronding van de test in de doos, plak het label op de doos zoals aangegeven en stuur het naar ons toe voor de juiste verwerking om het milieu te sparen. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Als u niet mee wilt doen aan het WatchPAT® ONE Green Program is het niet nodig het apparaat te behouden of terug te sturen. U kunt het gewoon weggooien.