

WatchPAT[®] ONE

Vienkartinis namie atliekamas miego apnėjos testas

Vaizdo įrašą su nuosekliomis instrukcijomis galite rasti svetainėje

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Vienkartinis namie atliekamas miego apnėjos testas

Techninės informacijos žymėjimas

Rx only



Dėmesio: federaliniai įstatymai leidžia parduoti šį prietaisą tik licencijuotam sveikatos priežiūros specialistui arba jo nurodymu



Temperatūros ribos: 0 °C-40 °C



Žr. naudojimo vadovą



1.5V DC mms



IP22 Apsauga nuo patekimo



BF tipo darbinė dalis

FCC ID

24PC0010NE

Federalinės ryšių komisijos identifikacinis numeris



Medicinos prietaiso gamintojas



Katalogo numeris



Serijos numeris



Pagaminimo data



Galiojimo data



Pagal direktyvą 2012/19/ES dėl EEEA, visos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai, draudžiama jas išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šį produktą ir visas jo dalis šalinkite atskirai ir nekenkdamai aplinkai.



Dūšta, elgis atsargiai



Laikyti sausi

IC: 27705-WATCHPATONE Kanados ISED sertifikavimo numeris

HV/N: WatchPAT ONE Nurodo gaminto versijos aparatinės įrangos techninės charakteristikos



Medicinos prietaisas



Japonijos sertifikavimo simboliai

REF 0047193483 - Ed. 3

Jei turite klausimų, kreipkitės į „Itamar[®] Medical“ pagalbos tarnybą telefonu
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Svarbios pastabos

- Laikymo ir naudojimo temperatūra: nuo 0 iki 40 °C
- Nebandykite prijungti ar atjungti kokios nors prietaiso dalies.
- Nėkiskite į prietaisą jokių pašalinių daiktų.
- Jokiomis aplinkybėmis nemėginkite išspręsti problemos savarankiškai.
- Priemonė „WatchPAT[®]ONE“ neturėtų kelti jokio diskomforto ar skausmo. Jei patiriate nepakeliamą diskomfortą, nusimkite priemonę ir skambinkite pagalbos tarnybai.
- Prieš įdėdami maitinimo elementą į apšildykite ir įsitikinkite, kad jis nėra išspūstęs, įskilęs, nesandarus ir neturi kitų defektų.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3086900 Izraelis
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP

Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Vokietija

Naudojimo instrukcijos

Nuskaitykite QR kodą, jei norite atsisiųsti programą „WatchPAT[®] ONE“



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Vaizdo įrašą su naudojimo instrukcijomis galite rasti svetainėje watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Vienartinis namie atliekamas miego apnėjos testas

Naudojimo instrukcijos


Šiame vadove pateiktos nuoseklios instrukcijos, kaip tinkamai naudoti miego apnėjos testą „WatchPAT® ONE“.

Prieš naudojant „WatchPAT® ONE“:

- Rekomenduojame dėti priemonę „WatchPAT® ONE“ ant nedominuojančios rankos.
- Zondą galima užmauti ant bet kurio piršto, išskyrus nykštį.
- Prieš naudodami nusirenkite aptempančius drabužius, nusiimkite žiedus, laikrodį ir kitus papuošalus.
- Nuo tiriamo piršto nuvalykite nagų laką ir pašalinkite dirbtinį nagą. Piršto nagas turi būti apkirptas trumpai.

Pastaba: naudokite tik šarminį AAA tipo maitinimo elementą. Neįdėkite maitinimo elemento, kol nesate pasiruošę eiti miegoti.

1. Prieš pradėdami miego tyrimą įsitinkinkite, kad turite interneto ryšį, telefoną, priemonę „WatchPAT® ONE“ ir PIN kodą.

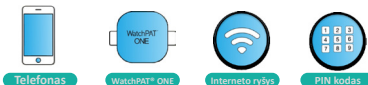

2. Atsisiųskite programą „WatchPAT® ONE“ į savo mobilųjį prietaisą (iš „Apple App Store“ arba „Google Play Store“).



3. Paleiskite programą „WatchPAT® ONE“ ir suteikite jai visus reikiamus leidimus. Šie leidimai būtini programai veikti.


Išimkite priemonę „WatchPAT® ONE“ iš dėžutės. Jei norite pamatyti priemonės konfigūravimo instrukcijas, spustelėkite programos mygtuką PREVIEW (peržiūra).

PERŽIŪRA

Kai būsite pasiręę, paspauskite mygtuką READY (paruošta).

PARUOŠTA

4. Įdėkite į priemonę „WatchPAT® ONE“ maitinimo elementą.

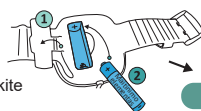

Tai padarę, paspauskite NEXT (toliau).

TOLIAU

5. Nusiimkite nuo testui naudojamos rankos laikrodį ir papuošalus.



Tai padarę, paspauskite NEXT (toliau).


TOLIAU

6. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą, pateiktą jūsų gydytojo arba tiekėjo, ir paspauskite ENTER (įvesti).



ĮVESTI

7. Užsidėkite priemonę „WatchPAT® ONE“ ant nedominuojančios rankos. Priemonė turi nei per daug spausti, nei būti per laisva.

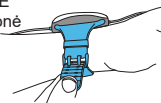

Tai padarę, paspauskite NEXT (toliau).

TOLIAU

8. Paimkite krūtinės jutiklį (knarkimo ir kūno padėties jutiklį) ir praveskite laidą pro rankovę ir apykaklę. Nuimkite nuo lipduko plėvelę ir prijaukite jutiklį po kaklo duobute.



Tai padarę, paspauskite NEXT (toliau).

TOLIAU

* Jei jūsų „WatchPAT® ONE“ yra be krūtinės jutiklio, praleiskite šį veiksmą.

9. Užmaukite zondą ant nedominuojančios rankos piršto iki galo. Galite mauti ant bet kurio piršto, išskyrus nykštį. Zondą reikia užmauti taip, kad lipdukas su užrašu TOP (viršus) būtų virš nago. Atremkite zondą į kietą paviršių ir lėtai traukite lipduko TOP (viršus) kraštą, kol nulupsite jį nuo zondo.



Tai padarę, paspauskite NEXT (toliau).

TOLIAU

10. Viskas paruošta. Paskutiniai keli veiksmai prieš pradedant miego tyrimą:
 - a. Telefonas turi būti ne toliau nei 5 metrai nuo „WatchPAT® ONE“.
 - b. Išjunkite visus kitus kambaryje esančius siųstuvus, pvz., išmaniuosius telefonus, išmaniuosius laikrodžius ir ausines, nes jie gali trukdyti testui.
 - c. Prijunkite telefoną prie įkroviklio – telefonas turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio visą naktį. Jei naktį pririekia atsikelti, palikite telefoną prijungtą, jo nešis su savimi nereikia.Dabar spustelėkite mygtuką START (pradėti), kad pradėtumėte miego tyrimą.

PRADĖTI

11. Ryte atsibudę paspauskite mygtuką END RECORDING (baigti įrašyti) ir palaukite kelias minutes, kol priemonė baigs perduoti duomenis. Baigus perduoti duomenis, išgirsite padėkos žinutę.

Ją išgirdę paspauskite CLOSE APPLICATION (uždaryti programą).

BAIGTI ĮRAŠYTI

UŽDARYTI PROGRAMĄ

12. Nusiimkite krūtinės jutiklį, zondą ir priemonę „WatchPAT® ONE“.

Naudotojams ne JAV: nereikia pasiikiti priemonės ar ją grąžinti. Tiesiog ją išmeskite.

Naudotojams JAV: jei norite dalyvauti programoje „WatchPAT® ONE Green“, galite grąžinti priemonę, naudodami pateiktą iš anksto apmokėtą etiketę. Atlikę testą, įdėkite priemonę į dėžutę, prijaukite ant dėžutės etiketę, kaip parodyta, ir siųskite ją mums, kad ji būtų tinkamai tvarkoma saugant aplinką. Ši paslauga nemokama. Jei nusprendėte nedalyvauti programoje „WatchPAT® ONE Green“, nereikia pasiikiti priemonės ar ją grąžinti. Tiesiog ją išmeskite.