

WatchPAT™ ONE

Egyszer használatos otthoni
alvási apnoe teszt

WatchPAT™ ONE Zöld program

A WatchPAT™ ONE Zöld programban* való részvételhez a következőt kell tennie, miután elvégezte az alvástesztet:

1. Vegye ki az elemet a WatchPAT™ ONE készülékből, és tegye vissza a készüléket a dobozába.
2. Látogasson el a www.itamar-medical.com/greenprogram oldalra, töltsse ki az űrlapot, és nyomtassa ki az előre fizetett visszaküldési címkét.
3. Ragassza fel a címkét a dobozra, és küldje vissza nekünk - teljesen ingyenesen.

Köszönjük, hogy segít egy zöldebb világ megteremtésében!

*A WatchPAT™ ONE Zöld program csak bizonyos országokban érhető el.

⚠ Fontos megjegyzések:

- A WatchPAT™ ONE olyan betegek számára javasolt, akiknél felmerül az alvással összefüggő légzési zavar gyanúja.
- A WatchPAT™ ONE egyszer használatos. Az egyszer használatos termékek ismételt használata keresztzennyeződést okozhat.
- Súlyos esemény esetén forduljon egészségügyi szakemberhez és az Itamar szervizirodájához további utasításokért.
- Tárolási és működési hőmérséklet: 0 °C - 40 °C
- Ne kísérelje meg csatlakoztatni vagy leválasztani a készülék bármely részét.
- Ne kíséreljen meg idegen tárgyakat behelyezni a készülékbe.
- Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg egyedül megjavítani a WatchPAT™ ONE készüléket.
- A WatchPAT™ ONE nem okozhat kellemetlenséget vagy fájdalmat. Ha elviselhetetlen kellemetlenséget tapasztal, távolítsa el a WatchPAT™ ONE készüléket, és hívja az ügyfélszolgálatot.
- Behelyezés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze az elemet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem duzzadt, repedt-e, nem szivárog-e, vagy nincs-e más hibája.
- A WatchPAT™ ONE készülék használata előtt a beteget klinikai személyzetnek kell kiképeznie.



A részletes videós útmutatót
lásd
watchpatone-howtouse.com



Ha bármilyen kérdése van, forduljon a
ZOLL Itamar™ Orvosi ügyfélszolgálatához:
1-888-748-2627

WatchPAT™ ONE

Egyszer használatos otthoni
alvási apnoe teszt



Részletes útmutató

Szkennelje be az
alábbi QR-kódot a
WatchPAT™ ONE
alkalmazás
letöltéséhez



ZOLL itamar

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900 Israel
T: +972-4-6177000
F: +972-4-6275598

Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Németország



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

2797

ZOLL itamar

WatchPAT™ONE | Lépésről lépésre útmutató | Egyszer használatos otthoni alvási apnoe teszt

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell helyesen használni a WatchPAT™ ONE otthoni alvási apnoe tesztet.

A WatchPAT™ONE használata előtt:


- + Győződjön meg arról, hogy rendelkezik internet-hozzáféréssel, telefonnal, WatchPAT™ONE eszközzel és PIN kóddal.
- + Távolítsa el a szűk ruházatot, az ékszereket és a kiegészítőket.
- + Válasszon ki egy ujját a nem domináns kezén, kivéve a hüvelykujját (ha nagy ujjai vannak, használja a rózsaszínűt).
- + Vágja le a körmét, és távolítsa el a körömlakkot vagy műkörömöt a kiválasztott ujjról.

Megjegyzés: Csak alkáli AAA elemet használjon. Csak akkor helyezze be az elemet, ha készen áll lefeküdni.

1. Töltse le a WatchPAT™ONE alkalmazást telefonjára (elérhető az App Store-ban és a Google Play Store-ban).

2. Nyissa meg a WatchPAT™ONE alkalmazást és engedélyezze az összes kért engedélyt. Ezek az engedélyek szükségesek az alkalmazás működéséhez. Vegye ki a WatchPAT™ONE-t a dobozból. A gyors útmutató hivatkozásra kattintva megtekintheti az alkalmazást, amely bemutatja a WatchPAT™ONE készülék beállítását. Nyomja meg a „Beállítás indítása” gombot, ha készen áll.

Beállítás indítása

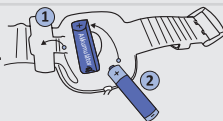

3. Helyezze be az elemet a WatchPAT™ONE eszközbe. Nyomja meg a > gombot, ha készen áll.
4. Előkészületek:
 - Győződjön meg arról, hogy a telefon éjszakára csatlakoztatva marad, és nincs repülő üzemmódban.
 - Kapcsoljon ki minden felesleges elektronikus eszközt a helyiségben.
 - A telefon ne legyen 15 lábnál/5 méternél távolabb a WatchPAT™ONE eszköztől.
 - Legalább 6 órányi adatrögzítés szükséges.

5. Írja be az orvosi rendelő vagy a szolgáltató által megadott 4 számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az > gombot.



6. Helyezze a WatchPAT™ONE eszközt a nem domináns kezére. Győződjön meg róla, hogy nem túl szoros és nem túl laza. Nyomja meg a > gombot, ha készen áll.




7. Ha a WatchPAT™ONE készülék mellkasérzékelőt tartalmaz:

- Ha szükséges, vágja le a mellkasszőrtet, hogy az érzékelő közvetlenül a bőrre csatlakozzon.
- Vezesse a mellkasérzékelőt a ruha ujj- és a nyaknyílásán keresztül.
- Húzza le a fehér papírt az érzékelő hátuljáról.
- Csatlakoztassa az érzékelőt a felső mellkascsont közepéhez, közvetlenül a szegycsont bevágása alá.
- Javasoljuk, hogy az érzékelőt orvosi szalaggal rögzítse a helyén. Nyomja meg a > gombot, ha készen áll.



8. Helyezze be teljesen a vizsgált ujját az érzékelőbe. Győződjön meg arról, hogy a TOP jelzésű matrica látható, amikor a kézfejére néz. Nyomja az érzékelő hegyét egy kemény felülethez (például asztalhoz), és lassan húzza vissza a TOP fület, hogy eltávolítsa az érzékelőrl.

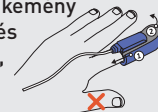

9. Kattintson a "Start recording" (Rögzítés indítás) gombra az alvásvizsgálat megkezdéséhez. Ügyeljen arra, hogy a telefon csatlakoztatva maradjon a töltőhöz.

Rögzítés indítása

10. Reggel nyomja meg az End Recording (Rögzítés befejezése) gombot, és várjon, amíg a WatchPAT™ONE készülék befejezi az adatátvitelt. Az adatátvitel befejezése után egy gratuláló üzenetet kap. Miután megkapta, nyomja meg a "Close App" (Alkalmazás bezárása) gombot.

Rögzítés befejezése

Alkalmazás bezárása

11. Vegye le a mellkasi érzékelőt, az ujjérzékelőt és a WatchPAT™ ONE eszközt. Kérjük, a WatchPAT™ONE készüléket a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.