

WatchPAT[®] ONE

Ühekordne kodune uneapnoe test

Samm-sammuline videojuhend on
saadaval aadressil

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Ühekordne kodune uneapnoe test

Tehnilise teabe märgistamine

Rx only

Hoiatus: Fideeraalsed seadused piiravad selle seadme müümist (litsentseeritud tervishoiutöötaja poolt või tellimusele)



Ühekordseks kasutamiseks, mitte uuesti kasutada



Temperatuuri piirväärtus 0°C - 40°C.



Vaadake kasutusjuhendit

1.5V DC

Aku tööpinge

IP22

Varjutumiskaitse



Tüüp BF rakendatud osa

ECC ID

24P-0010106

Fideeraalse kommunikatsioonikomisjoni identifitseerimisnumber



Meditsiiniseadmete tüüp

REF

Katalooginumber

SN

Seerianumber



Valmistamiskuupäev



Kõiklik kuni kuupäev



Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile 2012/19/EL tuleb kõik elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed koguda eraldi ja neid ei tohi käidelda koos tavajäätmetega. Kõrvaldage see toode ja kõik selle osad vastutustundlikult ring- ja jäätmesektori kaudu.



Habras, käsitsese ettevaatlikult



Hoidke kuivana

IC: 27705-WATCHPATONEISED Kanada sertimisnumber

HWIN: WatchPAT ONE Tuvastab tooteversiooni riisvara tehnilised andmed

MD

Meditsiiniseade

MD

Jaapani sertimisnumbrid

Kui teil on küsimusi,
võite pöörduda
Itamar[®] Medical kasutajate
poole numbril:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Olulised märkused:

- Ladustamis- ja töitempatuur 0°C - 40°C
- Ärge proovige ühtegi seadme osa ühendada ega lahti ühendada.
- Ärge proovige seadmesse sisse viia ühtegi võõrkeha.
- Ärge mingil juhul proovige probleemi ise lahendada.
- WatchPAT[®] ONE ei tohi põhjustada ebamugavust ega valu. Kui teil tekib talumatut ebamugavust, eemaldage seade ja helistage kasutajatele.
- Kontrollige akut enne paigaldamist visuaalselt ja veenduge, et see ei ole tursunud, pragunenud, lekkinud ega muude vigadega.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3089700 Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP

Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen
40549 Frankfurt am Main
Saksamaa

Samm sammult juhised

Valige alltoodud QR-kood, et laadida
alla WatchPAT[®] ONE rakendus



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Samm-sammuline videojuhend
on saadaval aadressil watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Ühekordne kodune uneapnoe test

Samm sammult juhised

Käesolev juhend näitab teile samm-sammult, kuidas WatchPAT® ONE kodust uneapnoe testi õigesti kasutada.

Enne WatchPAT® ONE kasutamist:

- Soovitav on kasutada WatchPAT® ONE seadet oma mittedomineeriva käega.
- Sondi võib panna igale sõrmele, välja arvatud põial.
- Enne kasutamist eemaldage kitsad riided, sõrmused, kellad ja muud ehted.
- Eemaldage sõrmelt küünelakk ja kunstküüned ning veenduge, et sõrmeküüs on lühikeseks lõigatud.

Märkus: Kasutage ainult Alkaline AAA-akut.
Ärge sisestage akut enne, kui olete valmis magama minema.

- Enne uueuuringuga jätkamist veenduge, et teil on internetiühendus, telefon, WatchPAT® ONE seade ja PIN-kood.



Telefon



WatchPAT® ONE



Internetiühendus



PIN-kood

- Laadige WatchPAT® ONE rakendus oma mobiilseadmesse (saadaval Apple App Store'is ja Google Play Store'is).



- Avage WatchPAT® ONE rakendus ja lubage kõik rakenduses nõutavad õigused. Need õigused on rakenduse toimimiseks vajalikud.

Võtke WatchPAT® ONE karbist välja. Kiirülevaate saamiseks klõpsake rakenduse nuppu „Preview“ (eelvaade), näidates, kuidas seadet seadistada.


Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu „Ready“ (valmis).

EELVAADE

VALMIS

- Sisestage aku WatchPAT® ONE seadmesse.

Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu „Next“ (järgmine).

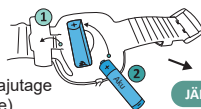

JÄRGMINE

- Eemaldage kell ja ehted oma uuringukäelt.

Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu „Next“ (järgmine).



JÄRGMINE


- Sisestage oma arstilt või teenusepakujalt saadud 4-kohaline PIN-kood ja vajutage „Enter“ (sisesta).

ENTER PIN
Sisestage määratud neljakohaline PIN-kood
(isikukood) ja vajutage sisestusklahvi
(ENTER)

SISESTA

- Pange WatchPAT® ONE seade oma mittedomineeriva käe peale. Veenduge, et see ei ole liiga pingul ega liiga lõdvalt.

Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu „Next“ (järgmine).

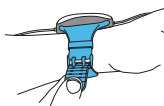

JÄRGMINE

- Võtke rinnaandur (norskamise ja kehaasendi andur) ning suunake kaabel läbi varruka ja kaelaava. Eemaldage kleebiselt sakk ja kinnitage andur vahetult rinnakusälgu alla.


Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu „Next“ (järgmine).



JÄRGMINE

* Kui teie WatchPAT® ONE seade ei sisalda rinnaandurit, jätkke see samm vahele.

- Asetage sond täielikult oma mittedomineeriva käe sõrmele. Võite kasutada mis tahes sõrme peale põidla. Sond tuleb sisestada nii, et TOP märgisega kleebis asetseks sõrmeküüne kohal. Hoidke sondi kõval pinnal ja tõmmake eemaldamiseks sondist aeglaselt TOP saki enda poole.

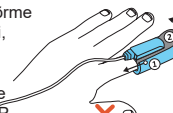

Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu „Next“ (järgmine).

JÄRGMINE

- Kõik on valmis.

Viimased sammud enne uueuuringu alustamist:

- Veenduge, et teie telefon ei asu WatchPAT® ONE seadme juurest rohkem kui 5 meetri kaugusel.
- Lülitage välja kõik teised ruumis olevad saateseadmed, nagu muud nutitelefoni, nutikellad ja kõrvaklapid, sest need võivad testi segada.
- Ühendage telefon laadijaga, see peab jääma terveks ööks elektrivõrku. Kui teil on vaja öisel ajal üles tõusta, ei pea te telefoni endaga kaasas kandma.

Nüüd klõpsake uueuuringu alustamiseks nuppu „Start“ (alusta).

ALUSTA

- Hommikul ärgates vajutage nuppu „End Recording“ (lõpeta salvestamine) ja oodake mõni minut, kuni seade andmeedastuse lõpetab. Pärast andmeedastuse lõpuleviimist saadetakse teile tänu sõnum.

LÕPETA
SALVESTAMINE

Pärast vastuvõtmist vajutage „Close Application“ (sulge rakendus).

SULGE RAKENDUS

- Eemaldage rinnaandur, sond ja WatchPAT® ONE seade.

V.a USA: Seadet ei ole vaja alles hoida ega tagastada. Te võite selle lihtsalt ära visata.

USA: Kui soovite osaleda WatchPAT® ONE Green Programmis, võite seadme kaasasoleva ettemakstud tagastussildiga tagastada. Pärast testi sooritamist pange seade karpi, kinnitage silt ettenäidatud viisil karbile ja saatke see meie keskkonna kaitsmise nimel nõuetekohaseks töötlemiseks tagasi. Teenus on tasuta. Kui otsustate WatchPAT® ONE Green Programmis mitte osaleda, ei ole vaja seadet alles jätta ega tagastada. Te võite selle lihtsalt ära visata.